



RingFlash 100/200



Manual de instrucciones

RingFlash 100/200



RingFlash 100/200

Manual de instrucciones	3
-------------------------------	---

Información de seguridad

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones.

Bajo ninguna circunstancia debe abrir el aparato ni llevar a cabo por su cuenta los posibles trabajos de reparación.

Lugar de instalación

Evite cualquier efecto excesivo de humo, polvo, vibración, sustancias químicas, humedad, calor y luz solar directa.

Alimentación eléctrica



Precaución: Utilice únicamente el alimentador de corriente suministrado adjunto ya que otras fuentes de alimentación podrían provocar daños en el aparato. Asegúrese de que el acceso a la clavija de adaptador de red no esté dificultado por muebles ni otros elementos similares.

Eliminación

Para desechar su aparato, llévelo al punto de recogida de un organismo de eliminación local (por ejemplo, un centro de reciclaje).



Según la ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos, los propietarios de aparatos antiguos están obligados por ley a llevar los **aparatos eléctricos y electrónicos** antiguos a un punto de recogida de basuras clasificada.

¡El símbolo adjunto significa que en ningún caso debe tirar el aparato junto con la basura doméstica!



¡Peligro para la salud y el medio ambiente provocado por baterías recargables y pilas! Jamás se deben abrir, dañar, ingerir ni permitir que las baterías recargables y pilas penetren en el medio ambiente.



Información de seguridad

Pueden contener metales pesados tóxicos y dañinos para el medio ambiente. Usted está obligado por ley a desechar de forma segura las baterías recargables y pilas a través del comercio de distribución de baterías, así como en los puntos de recogida competentes que ponen a disposición los depósitos correspondientes.

La eliminación es gratuita. Los símbolos adjuntos significan que las baterías recargables y las pilas en ningún caso deben tirarse junto con la basura doméstica y que deben ser eliminadas a través de los puntos de recogida.

Los **materiales de embalaje** se deben eliminar de forma correspondiente siguiendo las prescripciones locales.


Puesta en funcionamiento

Compruebe el contenido del embalaje

Contenido	RF100	RF200
Unidad RingFlash	1	1
Alimentador de corriente	1	1
Cable de conexión de teléfono	1	1
Unidad de timbre de la puerta	0	1
Pila de 12 voltios	0	1
Tornillos de fijación y tacos para la pared	0	4
Manual de instrucciones	1	1

Conexión de la estación base

Conecte la estación base según la figura. Por motivos de seguridad utilice únicamente alimentador de corriente y el cable de conexión de teléfono que forman parte del suministro.

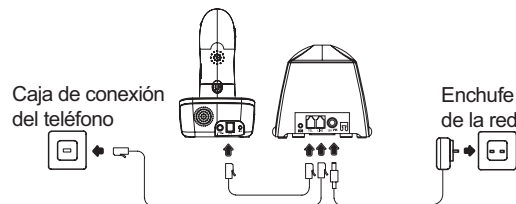


Cuando conecte la corriente de red, la unidad RingFlash comenzará a pitar para confirmar que su instalación ha finalizado correctamente. Si no escucha ningún pitido, extraiga la clavija de alimentación, espere 1 minuto y vuelva a enchufar la clavija.

Puesta en funcionamiento


Conexión de la unidad de timbre de la puerta (únicamente RingFlash 200)

El timbre de la puerta tiene un ajuste estándar del timbre que es 1. Si quiere cambiar este ajuste al timbre 2, debe desplazar el interruptor que se encuentra en el timbre de la puerta a las posiciones mostradas abajo.

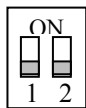

Timbre 1


El botón de indicación de parada de la unidad RingFlash se ilumina en rojo cuando se acciona el timbre de la puerta.

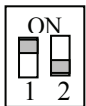

Timbre 2

El botón de indicación de parada de la unidad RingFlash se ilumina en verde cuando se acciona el timbre de la puerta.

Coloque la pila de 12 V que forma parte del suministro. A tal fin suelte los cuatro tornillos de la cubierta de la parte trasera. Preste atención a insertar las pilas correctamente orientadas. Vuelva a colocar la cubierta trasera y apriete los cuatro tornillos.

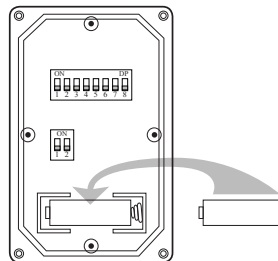

Únicamente deberá cambiar el ajuste del timbre cuando tenga más de un timbre conectado a su unidad RingFlash. Se ofrecen las dos opciones para que, en base al color de la lámpara de la tecla de PARADA, pueda ver qué timbre de la puerta se ha accionado y cuál es la puerta que debe abrirse.

Desencajar la cubierta delantera del timbre de la puerta insertando y girando una moneda pequeña en la ranura en cada extremo del timbre de la puerta. Fije el timbre de la puerta al lado de su puerta de entrada utilizando los 4 tornillos y tacos para la pared suministrados adjuntos.

Alarma vibratoria


Puede insertar un vibrador de almohada (no incluido en el volumen de suministro) en la hembrilla "((o))" en la parte trasera de la unidad RingFlash. El vibrador de almohada comienza a vibrar en cuanto entra una llamada.



Pongase en contacto con su suministrador para adquirir el vibrador de almohada (Ref. PTV100). Encuentre su proveedor en www.amplicomms.eu.

Su RingFlash 100/200


Tecla de
PARADA

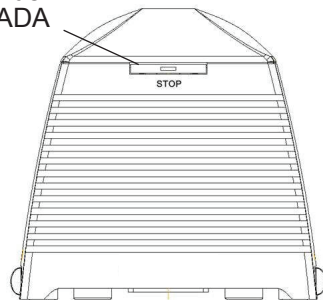

Vista frontal


Conexión
teléfono/
RingFlash (cable
suministrado
adjunto)

Enchufe para el
vibrador de almohada

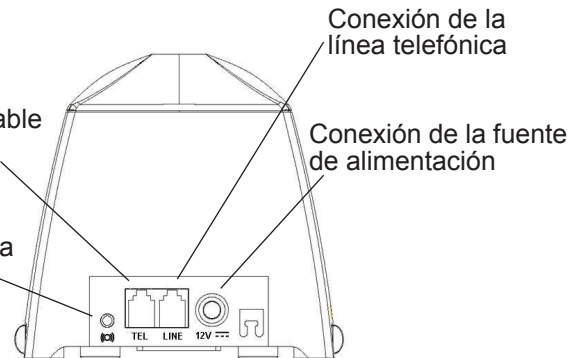


Vista trasera

Selección del
tono del timbre

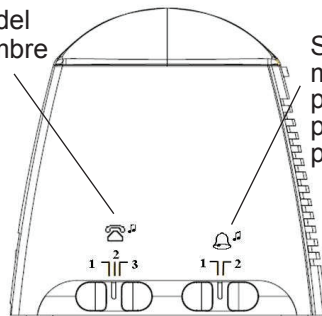

Lado izquierdo

Selección de la
melodía del timbre
para el pulsador de la
puerta (únicamente
para RingFlash 200)

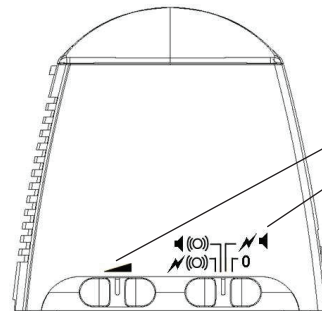

Lado derecho

Regulador de
volumen

Modo de
alarma

Cómo utilizar su RingFlash 100/200

Ajustar el tono del timbre

Su unidad RingFlash le ofrece 3 tonos del timbre para que pueda elegir. Simplemente mueva el interruptor deslizante en el lado izquierdo de su producto para seleccionar el tono del timbre 1, 2 o 3.

Ajustar la melodía del timbre de la puerta (únicamente RingFlash 200)

Puede elegir entre dos melodías del timbre diferentes de la puerta moviendo simplemente el interruptor deslizante en el lado izquierdo del producto para seleccionar la melodía del timbre de la puerta 1 o 2.

Ajustar el modo de alarma

Se puede elegir entre 4 modos de alarma. Utilice el interruptor deslizante en el lado derecho del producto para seleccionar uno de los siguientes modos de alarma.

Modo	Teléfono	Timbre de la puerta
0	Apagado	Tono del timbre del altavoz
	Luz parpadeante y altavoz	Tono del timbre del altavoz y luz parpadeante
	Altavoz y vibrador de almohada externo	Tono del timbre del altavoz y vibrador de almohada externo
	Luz parpadeante y vibrador de almohada externo	Tono del timbre del altavoz, luz parpadeante y vibrador de almohada externo

Suprimir el tono de llamada

Pulse la tecla de PARADA para suprimir el tono de llamada de la llamada entrante.

Cómo utilizar su RingFlash 100/200

Uso del timbre de la puerta (únicamente RingFlash 200)

Pulse el botón del timbre de la puerta. Se enciende la luz roja en el botón. La unidad RingFlash activará la melodía del timbre de la puerta ajustado por usted (tono 1 o 2).


Pulse la tecla de PARADA en la unidad RingFlash para detener el tono del timbre de la puerta. La lámpara roja del botón del timbre de la puerta permanecerá encendida durante 1 minuto y se apagará después.

Anomalías provocadas por otros aparatos (únicamente RingFlash 200)

Durante el uso del RingFlash 200 y del timbre de la puerta pueden producirse anomalías. Puede cambiar la frecuencia del RingFlash y del timbre de la puerta como sigue: en la parte inferior de la unidad RingFlash encontrará 8 interruptores pequeños debajo de la cubierta 8. La frecuencia de la unidad RingFlash la puede cambiar accionando estos interruptores.

A continuación debe cambiar de forma correspondiente también los 8 interruptores en el timbre de la puerta. A tal fin suelte los 4 tornillos de la cubierta trasera del timbre de la puerta (igual que al insertar la pila).

Cambie el ajuste de los 8 interruptores conforme al ajuste de la unidad RingFlash. A continuación puede volver a montar el timbre de la puerta al lado de su puerta de entrada.

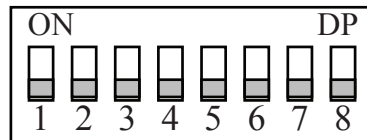

Fijación en la pared

En caso de utilizar unos tornillos y tacos adecuados para la pared (no incluidos en el suministro), puede fijar su unidad RingFlash mediante los agujeros en la base .

Mantenimiento/garantía

Mantenimiento/garantía

Mantenimiento

- Limpie la superficie del producto con un paño suave y libre de pelusas.
- Jamás utilice agentes de limpieza ni soluciones.

Garantía

Los aparatos Amplicomms se fabrican y se comprueban según los últimos métodos de producción. El uso de un material cuidadosamente seleccionado y de tecnologías avanzadas garantizan un funcionamiento sin anomalías y una larga vida útil en servicio. Las condiciones de garantía no son aplicables cuando la causa de la función errónea del aparato se debe a un fallo de la compañía de la red de telefonía o del posible sistema de ampliación de teléfono supletorio que se haya intercalado. Las condiciones de garantía no son aplicables a las baterías recargables ni a los juegos de baterías recargables que se utilizan en los productos. El período de

garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Se eliminarán gratuitamente todos los desperfectos que resulten de fallos de material o de producción y que aparezcan durante el período de garantía. El derecho de reclamación conforme a las condiciones de garantía queda anulado después de cualquier intervención del comprador o de terceras partes. Las condiciones de garantía no cubren los daños como resultado de un manejo o servicio indebido, de un posicionamiento o almacenamiento incorrecto, de una conexión o instalación indebida, de fuerza mayor o de otras influencias externas. En cualquier caso de reclamación nos reservamos el derecho de reparar o sustituir las piezas defectuosas o de suministrar un aparato de sustitución. Las piezas de recambio o los aparatos de sustitución pasan a ser de nuestra propiedad. Los derechos de compensación quedan excluidos en caso de daño si no queda

demostrada de forma fehaciente la intención o negligencia grave por parte del fabricante.

Si durante el período de garantía su aparato mostrara cualquier síntoma de defecto, rogamos se lo devuelva al distribuidor a quien ha adquirido el aparato Amplicomms junto con el justificante de compra. Todos los derechos de reclamaciones conforme a las condiciones de garantía y de acuerdo con este acuerdo deben hacerse valer exclusivamente frente a su distribuidor. A partir de los dos años desde la compra y la cesión de nuestros productos no es posible hacer valer reclamaciones conforme a las condiciones de garantía.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple los requisitos indicados en la siguiente directiva UE:

1999/5 Directiva UE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y el mutuo reconocimiento de su conformidad.

La conformidad con la directiva anteriormente mencionada se confirma mediante el símbolo CE en el aparato. Para poder ver la declaración de conformidad completa, rogamos que acceda a nuestra página web www.amplicomms.eu donde podrá descargar la misma gratuitamente.



Comercialización:

Audioline GmbH, D-41460 Neuss

Indicaciones de garantía importantes

Indicaciones de garantía importantes

El periodo de garantía para su producto Amplicomms comienza con la fecha de compra. Existe derecho de garantía en caso de defectos atribuibles a fallos de material o fabricación. El derecho de garantía se extingue en caso de intervenciones por parte del cliente o terceras personas. Queda excluido de las prestaciones de garantía cualquier daño originado por tratamiento o manejo indebido, desgaste natural, instalación o almacenamiento inadecuado, la conexión o instalación incorrecta, así como por fuerza mayor o cualquier otra influencia exterior.

EN CASO DE GARANTÍA ROGAMOS
QUE SE DIRIJA EXCLUSIVAMENTE AL
DISTRIBUIDOR DONDE HA ADQUIRIDO
EL APARATO.
NO OLVIDE PRESENTAR EL JUSTIFI-
CANTE DE COMPRA.

PARA EVITAR TIEMPOS DE ESPERA
INNECESARIOS, ROGAMOS QUE NO
ENVÍEN LOS APARATOS
DE RECLAMACIÓN A LA DIRECCIÓN
DE NUESTRA OFICINA.

EN CASO DE CUALQUIER PREGUNTA
RELACIONADA CON EL MANEJO Y LA
PRESTACIÓN DE GARANTÍA LEA
EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicomms.eu

Correo electrónico: info@audioline.de